



ANTI-AGING SKIN RENEWER | 9 IN 1



Skin Scan &
Personal Routine Guide



Superior Anti-Aging
Power Technology



Express Toning and
Skin Regeneration



MicroCurrent Pro
Face-Lift Technology



Full-Spectrum Power
LED Light Technology



Advanced RF Heated
Wavelengths



Low-Voltage
Current



Relaxing Warming
Technology



SmartSonic Pulsation
Technology

Profesionální

Omlazení
obličeje



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



DOBŘE VĚDĚT

TIP 01

Režimy Mikroproud a RF používej pouze v kombinaci s Hydratačním gelem MicroCurrent od GESKE.

TIP 02

Intenzitu mikroproudu a RF vlnových délek lze upravit podle tvého pohodlí.

TIP 03

Přístroj je vhodný pro Fitzpatrick typy pleti I-IV.



LED světla

8 barev




MicroCurrent

5 intenzit



RF vlnové délky

5 úrovní

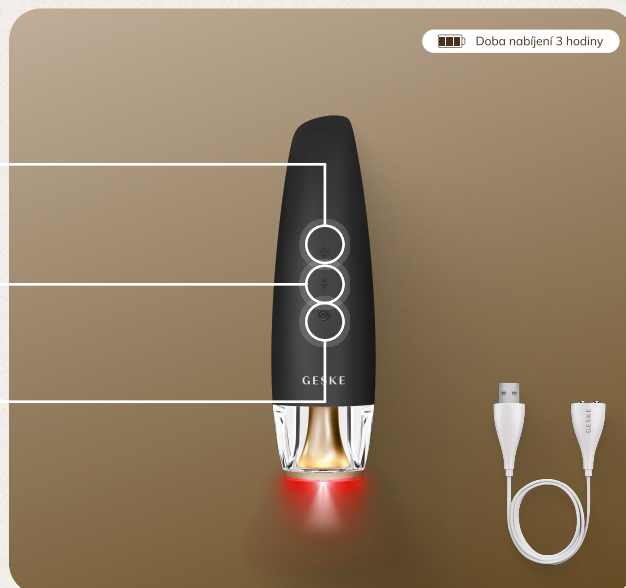

Zvýšit intenzitu

Krátký stisk



Zapnuto/Vypnuto

Stiskni na 1–2 sekundy
Stiskni znovu pro zapnutí pulzací




Snížit intenzitu

Krátký stisk

ZVLÁDNI PRVNÍ KROKY

Zažij úžasnou obnovu pleti s Anti-Aging Skin Renewer | 9 v 1. Tento přístroj je navržen tak, aby bojoval proti známčkám stárnutí díky pokročilým technologiím ke kterým patří mikroproud, radiofrekvenční vlny a LED světla v osmi různých barvách.

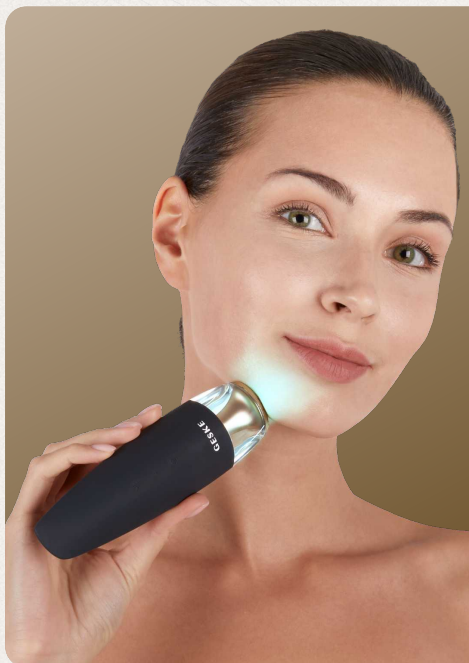

VYHŘÍVANÝ RADIOFREKVENČNÍ LIFTING OBLIČEJE

PŘÍPRAVA

Nanes Hydratační gel MicroCurrent nebo sérum dle tvé volby na oblasti, které budeš ošetřovat.

ZAPNUTÍ

Zapni přístroj podržením tlačítka napájení po dobu dvou sekund a aktivuj požadované technologie. Krátkým stisknutím tlačítka napájení při zapnutém přístroji zapni technologii SmartSonic Pulsation.

LIFTING

Pohybuj přístrojem po tvých tvářích, začni podél čelisti a potom přejdi přes lícní kosti a čelo. Opakuj to pětkrát.

DOKONČENÍ

Vmasíruj zbylé sérum do pokožky. Po každém použití zařízení důkladně opláchni vodou a nastříkej na něj náš organický čistič zařízení.



VYHŘÍVANÝ RADIOFREKVENČNÍ LIFTING RUKOU

APLIKACE

Nanes Hydratační gel MicroCurrent nebo sérum dle tvého výběru na hřbet rukou.

ZAPNUTÍ

Zapni přístroj podržením tlačítka napájení po dobu dvou sekund a aktivuj požadované technologie. Krátkým stisknutím tlačítka napájení při zapnutém přístroji zapni technologii SmartSonic Pulsation.

LIFTING

Polož jednu ruku na rovný povrch s mírně roztaženými prsty. Začni pod nehtem malíčku a pohybuj přístrojem po hřbetu prstu směrem k zápěstí. Opakuj pětkrát na každý prst.

DOKONČENÍ

Vmasíruj zbylé sérum do pokožky. Po každém použití zařízení důkladně opláchni vodou a nastříkej na něj náš organický čistič zařízení.

Vytvoř si svou osobní rutinu péče o pleť

a stáhni si naši aplikaci GESKE



Pokročilá aplikace



Video s průvodcem



Skenování pleti pomocí umělé inteligence



Tipy od expertů



Osobní průvodce



Odměny v aplikaci



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTI SI PŘED POUŽITÍM.

Před prvním použitím si přečti bezpečnostní informace. Uchovej všechny návody k použití.

Tvůj produkt na první pohled

Tvůj produkt je multifunkční kosmetické zařízení s radiofrekvencí, mikroproudem a LED technologií. Dvě nejintenzivnější technologie, radiofrekvenci a mikroproud, můžeš bezpečně používat až třikrát týdně. LED technologii lze používat denně. Pro maximální bezpečnost a optimální výsledky vždy používej svou personalizovanou péči o pleť, kterou vytváří aplikace GESKE. Stáhni si aplikaci GESKE a získáš svou personalizovanou rutinu.

Pokyny k použití:

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečti tyto bezpečnostní informace a produktový manuál. Nezapomeň si uložit kopii obou dokumentů, protože obsahují důležité informace o bezpečném používání a také technické a právní požadavky. Tento přístroj je produkt péče o pleť pro dospělé, není to lékařský přístroj a nemá léčivé vlastnosti. Při používání zařízení vždy dodržuj personalizované aplikace doporučené v aplikaci GESKE Beauty. Přístroj je dobíjecí, což umožňuje pohodlné a bezdrátové používání. Je nutné, aby byl před prvním použitím plně nabitý. Budeš potřebovat příložený USB nabíjecí kabel. První nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel musí být připojen k oběma magnetickým kontaktům na určených kovových kontaktních bodech přístroje. Pokud se nabíjecí kabel sám nepřipojí, zapoj ho do napájení a chvíli počkej. Tímto se znovu aktivuje magnetický efekt a kontakty se automaticky spojí. Ujisti se, že magnetické kontakty se připojují pouze ke kontaktním bodům přístroje, nikoli k jiným kovovým povrchům.

Specifikace

Materiály: ABS, akryl, PC, silikon, nerezová ocel | **Skladovací teplota:** -5 – +65 °C / 23 – 149 °F | **Baterie:** Li-Ion 3,7V | **Kapacita baterie:** 1 000 mAh | **Maximální nabíjecí proud:** 730 mA | **Nabíjecí napětí:** 5V | **Doba nabíjení:** cca 3 hodiny | **Provozní doba:** Provozní doba se liší v závislosti na aktivovaných technologiích a intenzitách | **Rozhraní:** USB | **Programy:** LED dekorativní světlo: 1 barva (bílá), Vibration: 5 úrovní rychlosti, RF: 5 intenzit, Mikroproud: 5 intenzit, Technologie LED světla: 8 barev

Výrobek není vhodný pro použití za následujících podmínek:

- Pokud máš implantované lékařské zařízení, kovové nebo jiné elektronické zařízení, jako je kardiostimulátor.
- Po laserovém ošetření nebo chemickém peelingu.
- Po kosmetické nebo lékařské operaci obličje.
- Nepoužívejte, pokud jste přecitlivělí na teplo (např. teplotní kopřivka).
- Pokud během používání pocítíte (příliš) intenzivní teplo, ihned přestaňte.

V následujících případech se poraďte s lékařem, zda je produkt vhodný k použití:

- Pokud máte srdeční onemocnění.
- Pokud trpíte autoimunitním onemocněním nebo epilepsií, konzultujte to se specialistou.
- V případě těhotenství. Bezpečnost používání během těhotenství nebyla stanovena.
- Pokud máte v anamnéze klinicky zhojený herpes simplex na obličeji: V ojedinělých případech může intenzivní kosmetický přístroj reaktivovat existující infekci herpes simplex na obličeji (zejména v oblasti rtů).

Další informace o použití:

- Informace o radiofrekvenci:
- Tento produkt využívá multipolární radiofrekvenci, která se zaměřuje na hluboké vrstvy kůže a povrchové vrstvy tukových tkání neoblativním způsobem, tedy bez poškození epidermis.
- Aby se snížilo riziko potenciálních vedlejších účinků a zabránilo přehřátí nebo popálení kůže, držte přístroj neustále v pohybu a nepoužívejte ho častěji, než je doporučeno.
- Vždy začněte s nejnižší intenzitou a pečlivě sledujte reakce své pokožky před zvýšením intenzity.
- Několik procedur s nižší intenzitou přináší lepší výsledky než jedna intenzivní procedura.
- Pro kontinuální zlepšování a viditelné výsledky je nutné přístroj používat pravidelně.
- Očekávané vedlejší účinky:
- Během nebo krátce po použití můžete zaznamenat erytém (zarudnutí kůže) a edém (otok kůže). Tyto vedlejší účinky jsou neškodné a měly by zmizet během několika hodin, maximálně po 24-48 hodinách po použití.
- Po použití přístroje na obličej můžete mít bolesti hlavy, které zmizí do 24-48 hodin.
- Neočekávané vedlejší účinky:
- Nadměrné použití RF (příliš často nebo příliš intenzivně) může způsobit depresi na kůži, pálení, zjizvení a poškození tukové tkáně nebo epidermis. Abyste tomu předešli, používejte přístroj pouze dle doporučení.
- Po intenzivním používání přístroje na krku může kůže pod uchem zčernatlivět. Tento vzácný vedlejší účinek je dočasný, ale může trvat několik týdnů, než úplně zmizí.
- Další bezpečnostní informace:
- Nepoužívejte výrobek na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo otevřené rány (po jakémkoliv poranění) nebo v případě plísňových, bakteriálních nebo virových infekcí kůže (ať už v místě použití, nebo jinde).
- Tento produkt není určen k léčbě kožních onemocnění nebo chorob, jako je plísňová infekce na nohou. Máš-li kožní onemocnění nebo chorobu, porad se před použitím tohoto produktu se svým dermatologem.
- Nepoužívejte produkt, pokud je 1) neobvykle teplý, 2) mechanicky poškozený nebo zdeformovaný, 3) změněný barevně. Díky RF technologii se očekává, že se zařízení během používání zahřívá.
- Pokud během používání pociťujete bolest nebo nepohodlí přesahující očekávané vedlejší účinky, okamžitě přestaňte přístroj používat a vyhledej lékařskou pomoc.
- Oční okolí je velmi citlivé: V této oblasti buďte obzvláště opatrní a vyhněte se jakémukoli kontaktu přístroje s víčky nebo samotným okem.
- Používejte přístroj pouze tak, jak je doporučeno ve vaší osobní rutině.
- Z hygienických důvodů doporučujeme, abyste svůj přístroj nesdíleli s nikým jiným.
- Produkt je určen pro kosmetické použití na obličej. GESKE nepřebírá odpovědnost za škodlivé následky vzniklé použitím na jiných částech těla nebo nesprávným použitím, připojením k nevhodným zdrojům napětí, kontaminovanou vodivou kapalinou nebo kuličkami.
- Před nabíjením se vždy ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Výrobek nesmí být používán, když je připojen k elektrické zásuvce.
- Produkt může vydávat intenzivní světlo, vyhněte se aplikaci ve směru nebo blízko otevřených očí.
- Před použitím technologie MicroCurrent Pro Face-Lift a RF vyhřívacích vlnových délek musí být produkt úplně suchý.
- Používejte technologii MicroCurrent Pro Face-Lift a Advanced RF vyhřívací vlnové délky pouze v kombinaci s GESKE Hydratačním gelem MicroCurrent.
- Nepoužívejte technologii MicroCurrent Pro Face-Lift a Advanced RF vyhřívací vlnové délky na oblast hrudníku, kolem očí, krku, genitálií/slabiny, nebo na zarudlou a zanícenou pokožku, mateřská znaménka a zvětšené krevní cévy.
- O dlouhodobých účincích MicroCurrentu a RF zatím nic nevíme.
- V důsledku stimulace očního nervu může být při použití vnímáno blikající světlo. Pokud tento stav přetrvává i při nepoužívání produktu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během aplikace se může objevit mírné brnění. Snížení intenzity mikroproudu nebo RF může omezit nebo odstranit brnění při proceduře.

- Elektronická monitorovací zařízení nemusí správně fungovat při použití přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné ostré předměty.
- Přístroj lze používat pouze s adaptérem pro bezpečné velmi nízké napětí (SELV).
- K nabíjení zařízení doporučujeme používat standardní napájecí zdroj IEC60335.
- Bezpečnost a účinnost produktu nebyla nikdy hodnocena ve spojení s produkty péče o pleť jiných výrobců než GESKE. Doporučujeme výrobek používat pouze s našimi mikroproudovými produkty. Používání s jinými produkty je na vaše vlastní riziko.
- Doporučená frekvence používání Přístroje závisí na zvolené technologii. Radiofrekvenci byste neměli používat více než třikrát týdně. Další technologie můžete bezpečně používat maximálně jednou denně.

Varování

Nebezpečí poranění při nesprávném použití!

Používejte produkt pouze podle pokynů ve Stručném průvodci a ve video instrukcích. Pokud máte další dotazy, kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese support@geske.com.

Nebezpečí úrazu v důsledku požáru/zničení!

Výrobek nehazte vodou. Nevhazujte výrobek do ohně.

Nebezpečí úrazu v důsledku vadných baterií!

Nesprávná manipulace s bateriemi může způsobit nekontrolovanou exotermní reakci. V takovém případě celý výrobek ihned a správně zlikvidujte.

Nebezpečí poranění dětí!

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Kapalina může poškodit nabíjecí okruh a ohrozit tvé zdraví. Při čištění odpoj produkt od nabíjecího kabelu/okruhu.

Nebezpečí poškození magnetickým polem!

Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou například kardiostimulátory. Nepoužívejte produkt přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obrať na svého ošetřujícího lékaře. Nedávej karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) blízko produktu, protože magnety produktu je mohou poškodit.

Nebezpečí poškození kvůli měnícím se okolním teplotám!

Změna okolní teploty (např. po přepravě) může způsobit kondenzaci. V takovém případě nepoužívejte produkt, dokud se nepřizpůsobí nové okolní teplotě. Nikdy nevystavuj produkt přímému slunečnímu záření, extrémnímu teplu nebo vrací vodě.

Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečí poškození z příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjecím procesu odpoj nabíjecí kabel od okruhu.

Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.



Informace o likvidaci přístroje a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součástky obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Po skončení životnosti je nutné je odevzdat na komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna jejich ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím a dobíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a akumulátorů jsme v souladu s evropskými předpisy povinni té, spotřebiteli, informovat o následujícím: Máš zákonnou povinnost vrátit baterie a akumulátory. Po použití je můžeš vrátit nám, odevzdat na komunálním sběrném místě nebo zdarma doručit místnímu prodejci. Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny následovně:



Tyto symboly znamenají, že baterie a dobíjecí baterie nemůžete vy, spotřebitel, likvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie a dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkách spolu s chemickou značkou těžkého kovu, který představuje hlavní znečišťující látku. Podrobné výše uvedené symboly znamenají:

Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť

Poznámky k lithiovým bateriím/nabíjecím bateriím

Lithiové baterie a lithiové dobíjecí baterie poznáte podle chemické značky „Li+“. Kromě výše uvedených informací bychom také rádi upozornili na následující: Při likvidaci lithiových baterií nebo dobíjecích baterií, ať už je vracíte nám, odnášíte na komunální sběrné místo, nebo je předáváte místním prodejcům či veřejným společnostem zabývajícím se likvidací odpadu, ujistěte se, že jsou úplně vybité. Také vás žádáme, abyste kontaktní plochy na baterii označené „+“ a „-“ přelepili lepicí páskou, abyste předešli riziku požáru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín tímto prohlašuje, že všechna elektronická zařízení splňují příslušné podmínky evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Omezení odpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci jsou odpovědní za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním GESKE Beauty Tech GmbH, jeho zástupcem nebo zprostředkovatelem v souladu s právními předpisy. S výjimkou újmy na životě, těle nebo zdraví a porušení zásadních smluvních povinností (hlavní povinnosti) ručí GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci pouze za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním. To platí i pro nepřímé škody, zejména úšlý zisk. Odpovědnost vůči spotřebitelům, s výjimkou případů úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, újmy na životě, těle nebo zdraví a porušení zásadních smluvních povinností (hlavní povinnosti), je omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména úšlý zisk. Pokud jde o společnosti, s výjimkou zranění na životě, končetinách a zdraví nebo úmyslného či hrubě nedbalého jednání ze strany GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejců, je odpovědnost omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a i na úroveň průměrných škod typických pro tuto zakázku. To platí i pro nepřímé škody, zejména úšlý zisk. Neručíme za škody způsobené: nedodržením tohoto manuálu, neobdobným použitím, neoprávněnými změnami, technickými úpravami, použitím neschválených náhradních dílů a příslušenství. Nároky na odpovědnost podle německé legislativy o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.